

株式会社瑞光の子会社である株式会社 瑞光メディカル(本社：大阪府摂津市、代表取締役社長：和田昇)は、熱傷や手術創といった創傷用の被覆・保護材としてご好評いただいております「プラスモイスト[®]」シリーズの商品ラインナップに「プラスモイストTOP」を新たに加え、2010年7月26日より全国の医薬品卸および医療機器卸を通じて販売を開始いたします。

◆「プラスモイストTOP」の商品概要

湿潤療法の広がりと共に、種々のドレッシング材が使用されるようになって参りましたが、創傷の状態に合わせて適切にドレッシング材を選定し、処置を行うには、ある程度の経験と知識が必要で、また、ドレッシング材によっては処置に煩雑な作業を要するものもあります。「プラスモイストTOP」は、この様な状況に鑑み、①「浸出液を適切にコントロールすることで、どんな創傷にも対応できる」、②「誰が処置しても簡単に、失敗なく処置できる」、というプラスモイスト[®]シリーズの商品コンセプトに沿って技術開発を行った被覆・保護材です。

この「プラスモイストTOP」は、二次ドレッシング材と一体化して創傷面に使用する全く新しいタイプの被覆・保護材で、適切な二次ドレッシング材を用いることで、浸出液の吸収量を任意に調節でき、従来処置が難しかった量の多い浸出液にも対応できるようになりました。また、二次ドレッシング材の吸収体を有効活用することで、極めて低コストを実現いたしました。

「プラスモイストTOP」は、医療機関、薬局は元より、今までプラスモイストシリーズの導入が難しかった介護施設、在宅介護に至るまで、様々なニーズにお応えいたします。

◆商品明細


販売名(カタログ番号)	サイズ(mm)	入数(1袋)	仕様	定価[税抜]	JANコード
プラスモイストTOP (TA1D)	200×250	20枚入り	未滅菌	¥5,000円	4571256950136

一般的名称：【一般医療機器】医療用不織布(JMDNコード:34655000)、医療機器製造販売届出番号：27B2X00217PMTA00


◆商品イメージ



パッケージデザイン

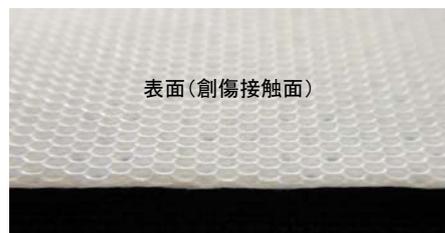

「プラスモイストTOP」表面写真

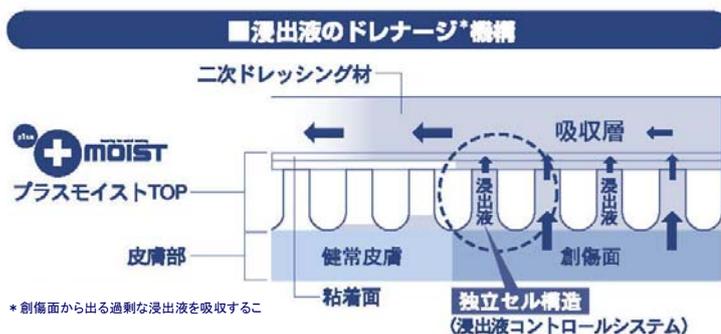


◆「プラスモイストTOP」の特長

- 傷口の乾燥や痂皮(かさぶた)形成の結果生じる本品と傷口の固着を防ぎ、やさしく保護します。
- 固着しにくいので、交換時の痛みも少なく快適です。
- 傷口から出る過剰な浸出液を吸収し、傷口以外の皮膚が「ムれる」、「ふやける」、「カブレる」等の皮膚トラブルが生じにくい構造です。
- 吸収量は、本品と一体化する二次ドレッシング材を選択することにより自由にコントロールでき、量の多い浸出液にも対応します。
- 薄型で柔軟な素材で構成されているので、様々な形状にフィットし、傷口を圧迫しません。
- 傷口の形状や大きさに合わせて、必要な分だけ自由にカットして使用できるので非常に経済的です。

◆使用方法

1. 傷口を生理食塩液、消毒液または水道水等で十分に洗浄してください。消毒液を使用した場合は、傷口に消毒液が残らないように水道水等で十分に洗い流してください。(本品を交換する際も同様に傷口を洗浄してください。)
2. 本品を包装袋から取り出し、傷口の周囲の正常な皮膚まで覆うことができる形状やサイズにハサミなどでカットします。次に、傷口から出てくる浸出液を十分に吸収でき、かつ、カットした本品よりひとまわり大きなサイズとなる二次ドレッシング材(ガーゼ等)を選定し、別に用意します。本品の離型紙をはがし、粘着面を別に用意した二次ドレッシング材に密着・固定して一体化を行います。
3. 二次ドレッシング材と一体化した本品の表面が傷口に密着するよう、テープや包帯、ネットなどを用いて二次ドレッシング材ごと固定してください。
4. 通常、二次ドレッシング材から浸出液がもれだすまで、連続して使用できますが、早め早めの交換をおすすめします。(少なくとも1日1回の交換をおすすめします。)

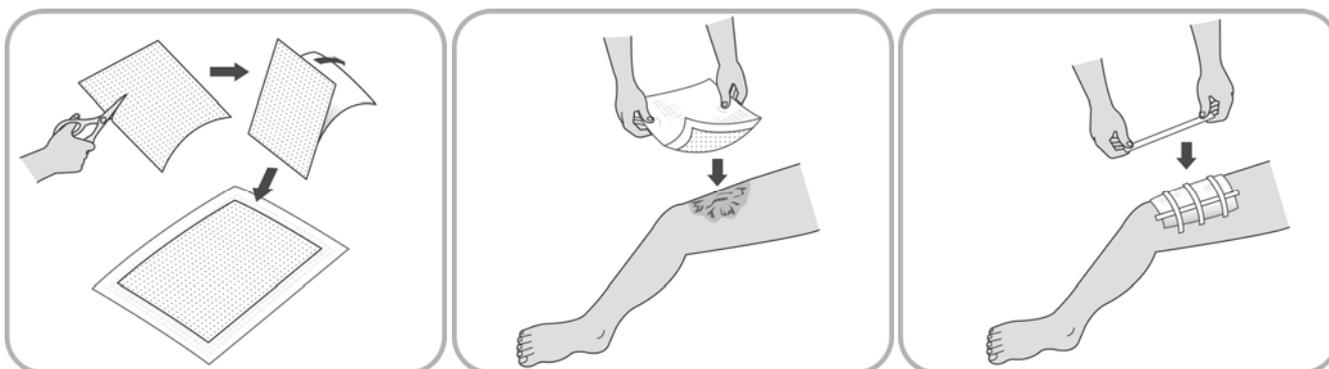

◆製造及び製造販売元：株式会社 瑞光メディカル

本件に関するお問合せ先

株式会社瑞光メディカル 販売管理部

メールアドレス: plus_moist@zuiko.co.jp

TEL: 072-653-8877 FAX: 072-653-8876