

ニュース・リリース

お得意先各位

2012年1月31日
株式会社瑞光メディカル

創傷用の被覆・保護材「プラスモイストTOP - P」を2月1日より新発売
～ 薬局・売店での様々な販売ニーズにお応えします～

株式会社瑞光の子会社である株式会社瑞光メディカル(本社:大阪府摂津市、代表取締役社長:和田昇)は、新鮮外傷や熱傷、また、褥瘡や皮膚潰瘍などの被覆・保護材としてご好評いただいております「プラスモイストTOP」シリーズの商品ラインナップに「プラスモイストTOP - P」を新たに加え、2012年2月1日より全国の医薬品卸および医療機器卸を通じて販売を開始いたします。

「プラスモイストTOP - P」の開発背景と商品概要

湿潤療法の広がりと共に、医療現場では種々のドレッシング材¹⁾が使用されるようになって参りましたが、瑞光メディカルでは、逸早くこれらのニーズに応えるべく、2010年夏より従来のプラスモイスト[®]シリーズの商品ラインナップに「プラスモイストTOP」を加えました。この「プラスモイストTOP」は、二次ドレッシング材と一体化して創傷面に使用する全く新しいタイプの創傷用の被覆・保護材で、適切な二次ドレッシング材を用いることで、浸出液の吸収量を任意に調節でき、従来処置が難しかった量の多い浸出液にも対応できる、通気性に優れ、ムレを抑えカブレにくい、二次ドレッシング材の吸収体を有効活用するので、極めて安価である、等々の商品特長から湿潤療法を実践されている多くの医療現場から絶大な支持を得、順調に販売数量を拡大しております。

「プラスモイストTOP - P」は、従来ジップ付の大袋入りであった「プラスモイストTOP」を、1枚ごと丁寧に個包装した商品で、より清潔に、より衛生的に取り扱いし易く致しました。手軽に使用できる一般医療機器として、薬局や院内売店での様々な販売ニーズにも充分お応えできる商品に仕上げています。

「プラスモイストTOP - P」は、医療機関は元より医師の指導の下実施される在宅や介護施設等での創傷治療を強力にサポート致します。

1)創傷の保護や治療目的で使用する医療衛生材料。狭義ではガーゼや包帯は含まず、これらに代わる医療衛生材料をいう。

商品明細

販売名(カタログ番号)	サイズ(mm)	入数(1ケース)	仕様	定価[税抜]	JANコード
プラスモイストTOP - P (TA2F)	200×125	50枚入り	個包装入[未滅菌]	¥8,000円	4571256950174

一般的名称: [一般医療機器]医療用不織布(JMDNコード:34655000), 医療機器製造販売届出番号: 27B2X00217PMTA01

商品イメージ



製品パッケージ




個包装パッケージ



表面(創傷接触面)

「プラスモイストTOP-P」表面写

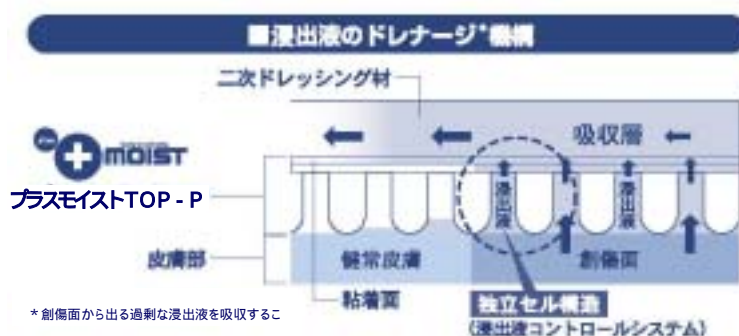

「プラスモイストTOP-P」の特長

- 1枚ごと個包装されており、より清潔に、より衛生的に取り扱いし易いです。
- <「プラスモイストTOP」共通の特長>
- 傷口の乾燥や痂皮(かさぶた)形成の結果生じる本品と傷口の固着を防ぎ、やさしく保護します。
- 固着しにくいので、交換時の痛みも少なく快適です。
- 傷口から出る過剰な浸出液を吸収し、傷口以外の皮膚が「ムれる」、「ふやける」、「カブれる」等の皮膚トラブルが生じにくい構造です。
- 吸収量は、本品と一体化する二次ドレッシング材を選択することにより自由にコントロールでき、量の多い浸出液にも対応します。
- 薄型で柔軟な素材で構成されているので、様々な形状にフィットし、傷口を圧迫しません。
- 傷口の形状や大きさに合わせて、必要な分だけ自由にカットして使用できるので非常に経済的です。

使用方法

1. 傷口を生理食塩液、消毒液または水道水等で十分に洗浄してください。消毒液を使用した場合は、傷口に消毒液が残らないように水道水等で十分に洗い流してください。(本品を交換する際も同様に傷口を洗浄してください。)
2. 本品を個包装袋から取り出し、傷口の周囲の正常な皮膚まで覆うことができる形状やサイズにハサミなどでカットします。次に、傷口から出てくる浸出液を十分に吸収でき、かつ、カットした本品よりひとまわり大きなサイズとなる二次ドレッシング材(ガーゼ等)を選定し、別に用意します。本品の離型紙をはがし、粘着面を別に用意した二次ドレッシング材に密着・固定して一体化を行います。

3. 二次ドレッシング材と一体化した本品の表面が傷口に密着するよう、テープや包帯、ネットなどを用いて二次ドレッシング材ごと固定してください。
4. 通常、二次ドレッシング材から浸出液がもれだすまで、連続して使用できますが、早め早めの交換をおすすめします。(少なくとも1日1回の交換をおすすめします。)



製造元及び製造販売元：株式会社瑞光メディカル

【会社概要】

社名：株式会社瑞光メディカル
所在地：〒566-0062 大阪府摂津市鳥飼上四丁目3番50号
設立年月日：平成18年9月15日
資本金：7,500万円
代表者：代表取締役社長 和田 昇
事業内容：医療機器及び医療機器中間材料の製造販売
URL：<http://www.zuiko-medical.co.jp/>

【ニュース・リリースに関するお問合せ】

株式会社瑞光メディカル 販売管理部 広報担当：清水
メールアドレス：plus_moist@zuiko.co.jp
TEL: 072-653-8877 FAX: 072-653-8876