

ニュース・リリース

お得意先各位

2012年6月25日
株式会社瑞光メディカル

～ とびひ、あせも、アトピー等のひっかきキズに ～
非固着性吸収パッド
「プラスモイストDCR」、「プラスモイストDC」
の2タイプを7月2日より新発売

株式会社瑞光の子会社である株式会社瑞光メディカル(本社:大阪府摂津市、代表取締役社長:和田昇)は、新鮮外傷や熱傷、また、褥瘡や皮膚潰瘍などの被覆・保護材としてご好評いただいておりますプラスモイスト®シリーズの商品ラインナップに、新たに、とびひ、あせも、アトピー等のひっかきキズの保護に特化した非固着性吸収パッド「プラスモイストDCR」、ならびに、「プラスモイストDC」を加え、2012年7月2日より全国の医薬品卸および医療機器卸を通じて販売を開始いたします。

◆「プラスモイストDCR」、「プラスモイストDC」の開発背景と商品概要

近年、創傷治療ではモイストヒーリングの考え方に沿った種々のドレッシング材が使われるようになってきました。一方、とびひやあせも、アトピー等の皮膚疾患のひっかきキズの保護にも、これらドレッシング材を使いたいというニーズが多くありましたが、適正な通気性や浸出液の吸収特性を得るのが難しく、これら用途に満足していく商品が少ないのが現状でした。

瑞光メディカルでは、これら市場のニーズに応えるべく研究開発を行い、弊社が所有する浸出液コントロール技術を発展させることで、この度、皮膚疾患のひっかきキズの保護に理想的なドレッシング材の開発に成功致しました。具体的には、微細孔で形成されているセル構造のメッシュシートを表裏に配した新構造を採用することで、創傷面への固着を防ぐのは勿論のこと、プラスモイスト従来品(V, P, W)と比較して、ドライ傾向となる絶妙の浸出液コントロールと、卓越した通気性を実現致しました。

医科向けの「プラスモイストDCR」は、箱入りロール状とすることで、医療現場にて様々なサイズに切り出し使い易い商品形態に仕上げています。

また、一般パッケージの「プラスモイストDC」は、少量包装パッケージとしたことで医療機関での使用は元より、薬局や売店等での販売ニーズにもお応え致します。

◆商品明細

[医科向け]【一般医療機器】

販売名(製品番号)	サイズ(mm)	入数(1ケース)	仕様	定価[税抜]	JANコード
プラスモイストDCR (DARR)	125×3000	1ロール	箱入り[未滅菌]	¥5,000円	4571256950242


一般的名称: 医療用不織布(JMDNコード:34655000), 医療機器製造販売届出番号: 27B2X00217PMDA00

【一般パッケージ】 【一般医療機器】

販売名(製品番号)	サイズ(mm)	入数(1袋)	仕様	定価[税抜]	JANコード
プラスモイストDC (DA3C)	125×125	5枚	ジップ袋入[未滅菌]	¥1,100円	4571256950235

一般的名称：医療用不織布(JMDNコード:34655000)，医療機器製造販売届出番号：27B2X00217PMDA01

◆商品イメージ

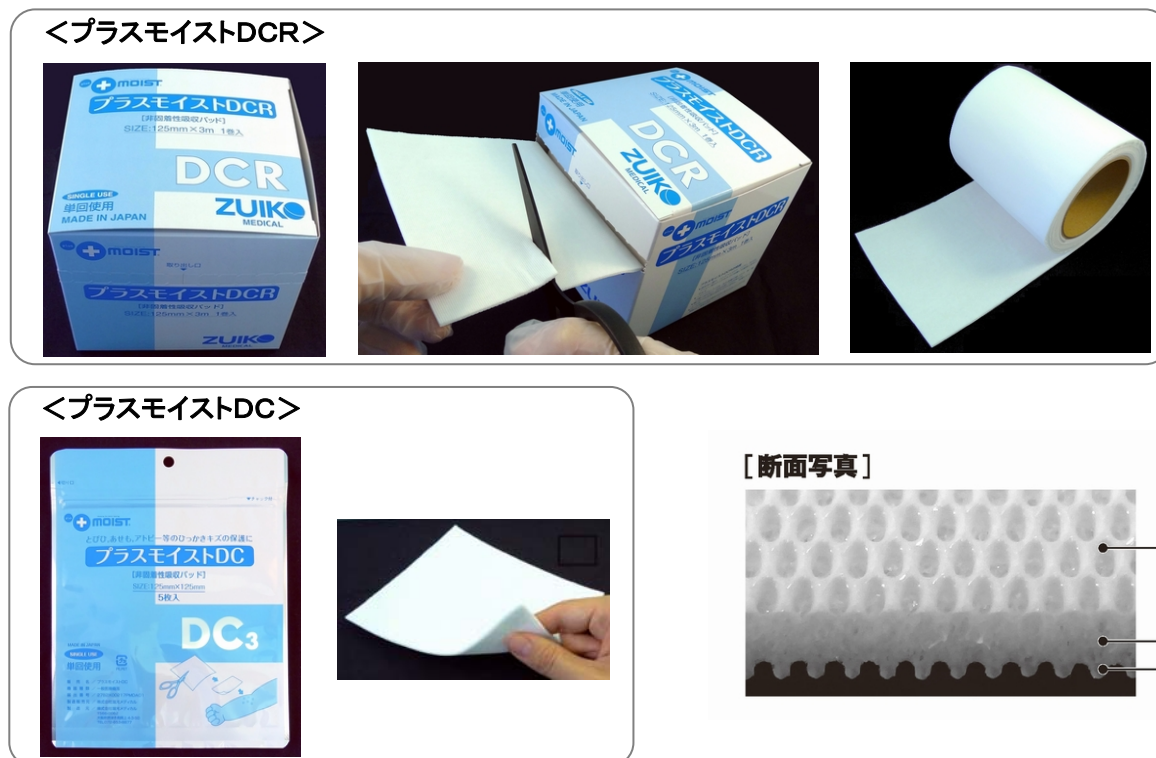

◆「プラスモイストDCR」、「プラスモイストDC」の特長

- 通気性に優れ、ムレにくいので、とびひ、あせも、アトピー等の皮膚疾患のひっかきキズの保護に簡単に使用できます。
- キズから出る浸出液をすばやく吸収します。
- 本品とキズとの固着を防ぎ、治癒まで優しく保護します。
- 固着しにくいので、交換時の痛みも少なく快適です。
- 傷口の形状や大きさに合わせて、必要な分だけ自由にカットして使用できるので非常に経済的です。また、表裏が無いので、指・脇の間に挟むなど、自由な使い方が可能です。
- プラスモイストDCRは、医療現場で使い易いロール形状です。


◆使用方法

＜参考：プラスモイストDC＞

1. キズを生理食塩液、消毒液または水道水等で十分に洗浄してください。消毒液を使用した場合は、キズに消毒液が残らないように水道水等で十分に洗い流してください。(本品を交換する際も同様にキズを洗浄してください。)本品を包装袋から取り出し、キズの周囲の正常な皮膚まで覆うことができる

サイズにハサミなどでカットして下さい。

2. 本品をキズにあて、ずれないように包帯、ネット、サージカルテープ、フィルムドレッシング等で固定して下さい。(本品は、表裏どちらでも使用できます。)
3. サージカルテープで固定しても問題ありませんが、ずれが気になる場合は、その上からネット、包帯等を巻くと、よりしっかり固定されます。テープカブレが気になる場合は、ネット、包帯のみで固定して下さい。通常、浸出液が本品の周囲からもれ出すまで、連続して使用できますが、早めの交換をおすすめします。(少なくとも1日1回の洗浄・交換をおすすめします。)

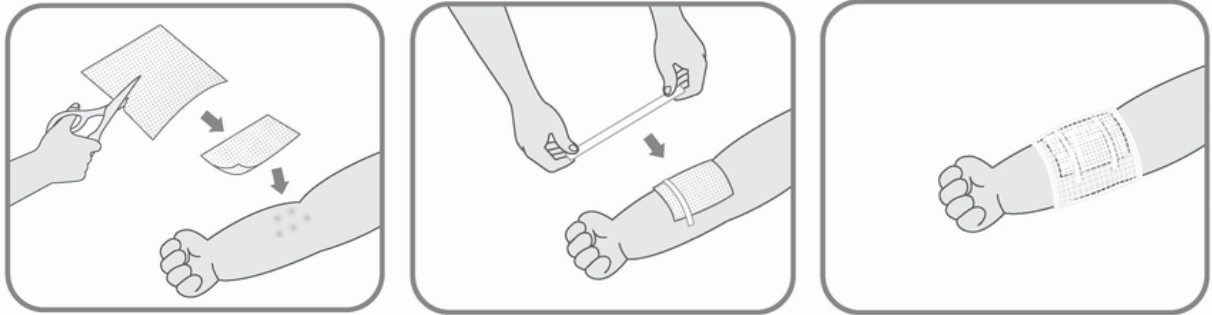

◆製造元及び製造販売元：株式会社瑞光メディカル

【会社概要】

社名：株式会社瑞光メディカル
所在地：〒566-0062 大阪府摂津市烏飼上四丁目3番50号
設立年月日：平成18年9月15日
資本金：7,500万円
代表者：代表取締役社長 和田 昇
事業内容：医療機器及び医療機器中間材料の製造販売
URL：<http://www.zuiko-medical.co.jp/>

【ニュース・リリースに関するお問合せ】

株式会社瑞光メディカル 販売管理部 広報担当：清水
メールアドレス：plus_moist@zuiko.co.jp
TEL: 072-653-8877 FAX: 072-653-8876