

ニュース・リリース

お得意先各位

2011年8月26日
株式会社瑞光メディカル

「ZUIKOPAD™(ズイコウパッド™)」を8月26日より新発売
～各種ドレッシング材¹⁾の浸出液吸収力をサポートします～

株式会社瑞光の子会社である株式会社瑞光メディカル(本社: 大阪府摂津市、代表取締役社長: 和田昇)は、プラスモイストTOPなどの各種ドレッシング材に対し、二次ドレッシング材としてお使いいただける吸収力に優れたパッド「ZUIKOPAD™(ズイコウパッド™)」を、2011年8月26日より、インターネット通販サイトamazon.co.jp(アマゾン ジャパン株式会社)を通じて販売致します。また、販売体制が整い次第、自社ホームページやFAXでも、ご注文の受付を開始致します。

1) 創傷の保護や治療目的で使用する医療衛生材料。狭義ではガーゼや包帯は含まず、これらに代わる医療衛生材料をいう。

◆商品明細


販売名(カタログ番号)	サイズ(mm)	入数 (枚)	定価 [税込]	JANコード
ZUIKOPAD™ ズイコウパッド™ (ZC4D)	本体: 180×190 吸収体: 150×150	20	¥1,980 円	4571256950167

素材: ポリエチレン、セルロース、ポリアクリル酸ナトリウム等

◆商品イメージ



パッケージデザイン

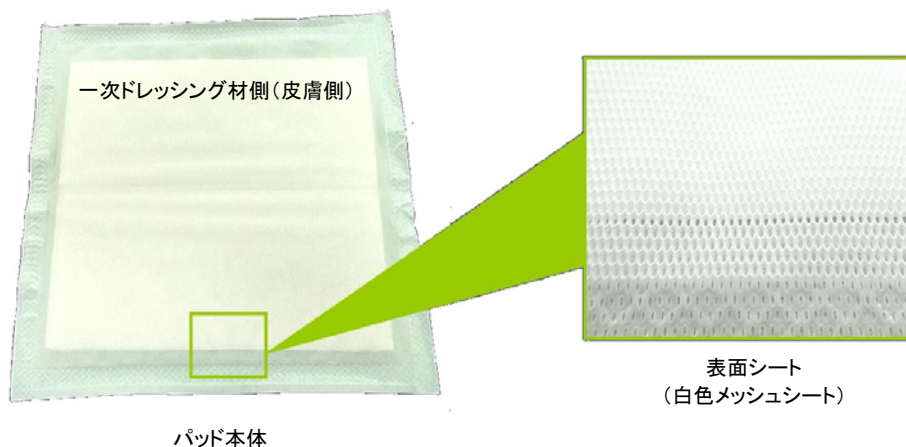

◆「ZUIKOPAD™(ズイコウパッド™)」の特長

- 非常に柔軟で、吸収力に優れたパッドです。
- 高吸収性のポリマーシートを使用しているため、多量の浸出液でも1枚で十分に吸収することができます。

吸収量 ^(※)	63g/100cm ² (142g/1枚当り)
--------------------	------------------------------------

※) 測定方法： Test methods for absorbency EN13726-1(2002)

- 特殊形状の表面シート(白色メッシュシート)が吸収体本体部に固定されていないという ZUIKOPAD™ (ズイコウパッド™)独自の構造が、優れたズレ応力(剪断応力)の緩和と卓越した柔軟性を実現します。
- パッケージのフロント部に名前記入欄を設けてあり、使用者毎に箱を区別・管理して使用できます。

◆使用方法

白色メッシュシートを一次ドレッシング材側(皮膚側)に使用します。

◆製造販売元

株式会社瑞光メディカル

【ニュース・リリースに関するお問合せ】

株式会社瑞光メディカル 販売管理部 広報担当：清水

メールアドレス： plus_moist@zuiko.co.jp

TEL: 072-653-8877 FAX: 072-653-8876