

ニュース・リリース

お得意先各位

2018年8月
株式会社瑞光メディカル

「キズ消臭シート」を8月21日より新発売
～毎日の創傷治療を快適に～

株式会社瑞光の100%子会社である株式会社瑞光メディカル(本社:大阪府摂津市鳥飼上4-3-50、代表取締役社長:和田 昇)では、創傷治療中の不快な臭いを解消する新商品「キズ消臭シート」を2018年8月21日より、全国の医薬品卸および医療機器卸を通じて販売を開始致します。

◆「キズ消臭シート」の開発背景と商品概要

近年、創傷治療では湿潤療法(モイストヒーリング)が主流となって参りましたが、治療中に浸出液による特有の臭いが気になるという患者の声が多く寄せられるようになって参りました。湿潤療法に限らず、皮膚に露出した悪性腫瘍や重度の褥瘡、潰瘍といった壊死組織や浸出液が非常に多い症例では、臭気を伴うことが多く大変不快であり、また、日常生活を行いながら在宅で創傷治療を受ける患者にとって当該臭気の問題は、周囲への配慮という観点からも大きなストレスになるケースが有ります。

一方、当該臭気を和らげるために消臭スプレー等が使用されることもありますが、その消臭効果は一時的なものであり、満足のいくものではありませんでした。また、医療機関に患者から臭気に関する相談が寄せられても、まずは治療だけが優先されることが多く、当該臭気に対し善処されることは稀でした。

そこで瑞光メディカルでは、これらの湿潤療法中の防臭に対する市場ニーズに応えるべく、今まで培ってきたドレッシング材の使用法の知見を活用することで、ドレッシング材の上から固定するだけで、創傷治療中の不快な臭いを解消できる新商品「キズ消臭シート」を開発致しました。

「キズ消臭シート」は、シート内に含まれる活性炭が、創傷治療中の浸出液などの気になる臭いの成分を効率良く吸着することにより、短時間で大きな消臭効果を発揮します(図I参照)。創傷治療中の患者の臭気に対する負担を軽減し、毎日を快適に過ごせるようサポート致します。

【四大悪臭の消臭効果のデータ】

測定時の初発濃度 (ppm)

硫化水素	トリメチルアミン	メチルメルカプタン	アンモニア
20	20	25	100

検知管法で測定したガス濃度残存率 (%)

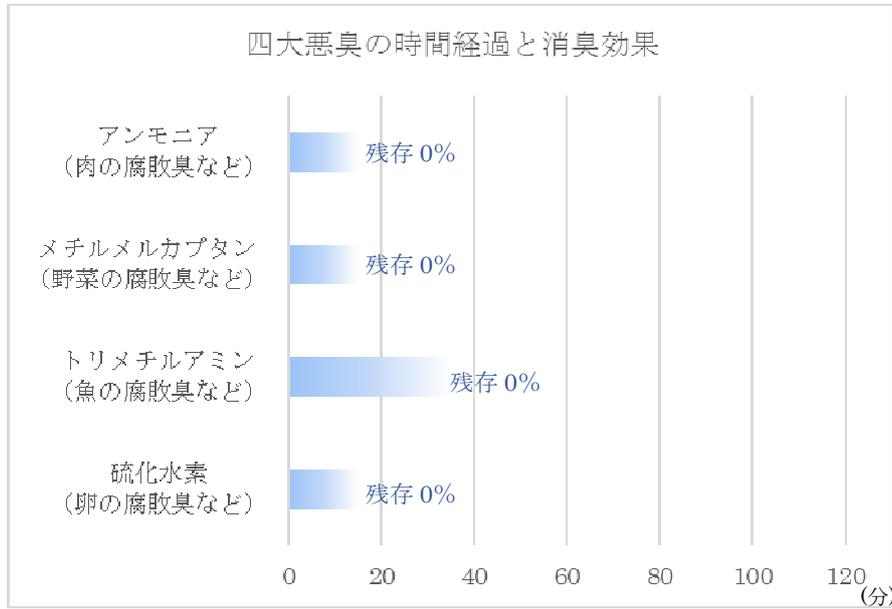


図 I


◆商品明細

商品名(商品コード)	サイズ(mm)	入数(1袋)	仕様	定価[税抜]	JANコード
キズ消臭シート (ZAFI)	150×200	1枚	ジップ袋入	498円	4571256950594

◆商品イメージ



商品パッケージ

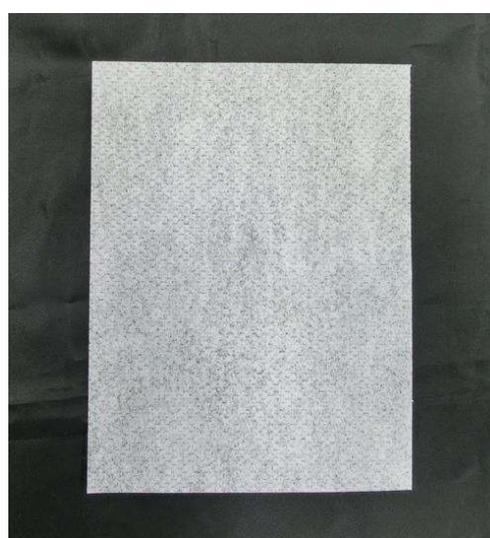

シート本体

◆「キズ消臭シート」の特長

- シートに含まれる活性炭が、浸出液などの気になる臭いの成分を吸着することにより、創傷治療中に生じる不快な臭いを消臭します。
- 使用后、短時間で消臭効果を発揮し、また消臭効果が持続します。
- 必要な分だけハサミでカットして使用できるので経済的です。
- 柔軟なシートタイプになっており、ドレッシング材を選ばず使用することができます。
- パッケージ裏面に名前記入欄を設けており、使用者毎に使い分けと保管ができます。

◆使用方法



1. 市販のキズあてパッド等をキズ口に当て、固定します。



2. 本品をキズあてパッドよりひとまわり小さな形状、サイズにカットします。



3. キズあてパッドの上から本品を当て、包帯、ネット、サージカルテープ等で動かない程度に別途固定します。

消臭効果が認められなくなったら、新しいものに交換してください。
また、交差感染を防ぐ上で、使用者本人以外は使用しないでください。
(使用者本人以外の他者への使い回し厳禁)

【ニュース・リリースに関するお問合せ】

株式会社瑞光メディカル 販売管理部

メールアドレス: plus_moist@zuiko.co.jp

TEL: 072-653-8877 FAX: 072-653-8876