


ZUIKOPAD™ (ズイコウパッド™)



| カタログ番号 | サイズ | 入数(枚) | 定価(円) [税抜] | JANコード |
|--------|---|-------|---------------|---------------|
| ZC4D | 本体: 180mm × 190mm 吸収体: 150mm × 150mm | 20 | ¥1,886- | 4571256950167 |

販売名: ZUIKOPAD™ (ズイコウパッド™) 素材: ポリエチレン、セルロース、ポリアクリル酸ナトリウム等

ZUIKOPAD™ (ズイコウパッド™) の特長

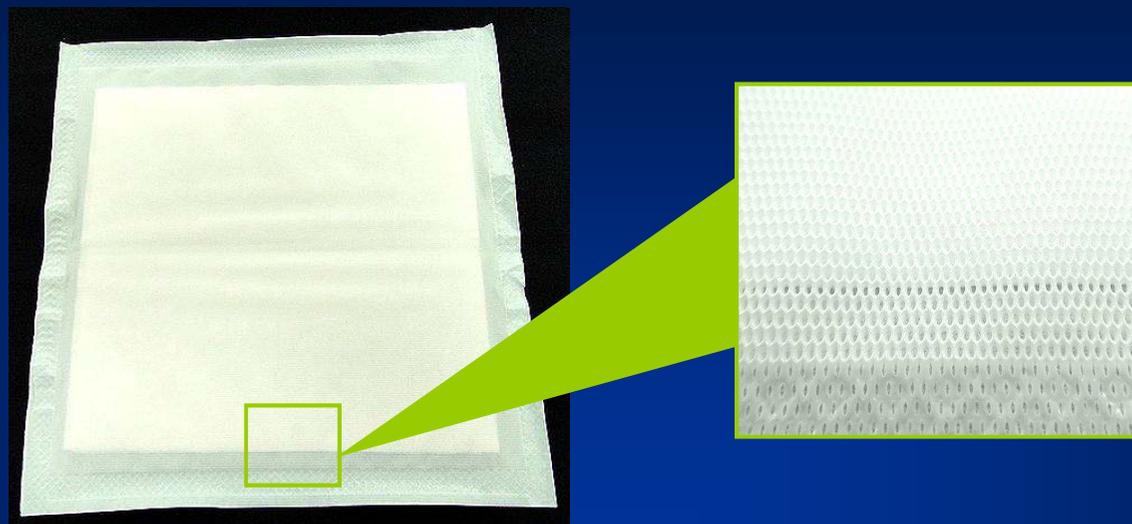

- 非常に柔軟で、吸収力に優れたパッドです。
- 高吸収性のポリマーシートを使用しているため、多量の浸出液でも1枚で十分に吸収することができます。

吸収量(※)

63 g/100cm² (142 g/1枚当り)

- 特殊形状の表面シート(白色メッシュシート)が吸収体本体部に固定されていないというズイコウパッド™独自の構造が、優れたズレ応力(剪断応力)の緩和と卓越した柔軟性を実現します。
- 箱前面に名前記入欄を設けてあり、使用者毎に箱を区別・管理して使用できます。

※)測定方法: Test methods for absorbency EN13726-1 (2002)

使い方

白色メッシュシートを一次ドレッシング材側(皮膚側)に使用します。